


SYSTEMAT



SZÁJZUHANY

EL25941 / EL25942 / EL25943 / EL25944

HU- Használati útmutató

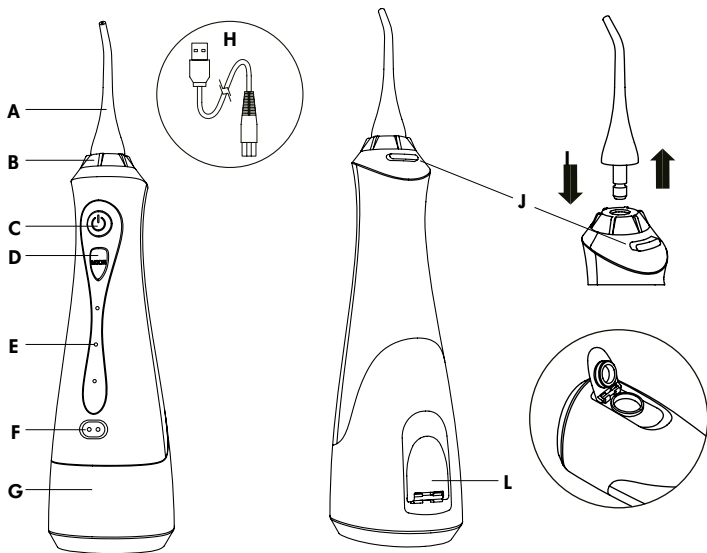

- A** - Fúvóka
B - Díszítő gyűrű
C - ON/OFF gomb.
D - Folyadékelosztási mód beállításának módosítása
E - A folyadékelosztási mód leírása
F - A kiválasztott mód fényjelzője

- G** - Vízartály (230 ml)
H - Töltőkábel (a csatlakozó nem tartozék)
I - A fúvóka behelyezésének / eltávolításának iránya
J - Fúvóka rögzítőgombja
K - Tartály töltőnyílása
L - A tartály töltőnyílásának zárófedél

Köszönjük, hogy megvásárolta otthoni **SZÁJZUHANYUNKAT EL29141, EL29142, EL29143 és EL29144.**

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS:

Ahogy más elektromos készülékek használatakor is, a SZÁJZUHANY esetében is fokozott óvatosság szükséges a készülék kezelésekor, különösen, ha gyermekek vannak a közelben. Ezeket a biztonsági ajánlásokat mindig be kell tartani. Kérjük, olvassa el a teljes használati útmutatót a készülék használata előtt. Őrizze meg ezt az útmutatót!

- **SOHA** ne használja a készüléket csatlakoztatva az elektromos hálózathoz, ha a keze nedves vagy vizes.
- **SOHA** ne helyezze vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahonnan a fürdőkádba vagy mosdóba eshet.
- **SOHA** ne merítse a készülék testét (az akkumulátort) vízbe vagy más folyadékba.
- **SOHA** ne használja a készüléket fürdés vagy zuhanyzás közben.
- **SOHA** ne töltsen olyan töltővel, amely bármilyen folyadékba esett. Azonnal húzza ki a konnektorból.

Az áramütés, tűz, egészségügyi vagy anyagi károk kockázatának csökkentése érdekében tartsa be az alábbi utasításokat:

- Az első üzembe helyezés előtt alaposan tanulmányozza át ezt a használati útmutatót és nézze meg az ábrákat.
- Az útmutatóban található utasítások a készülék részét képezik, és szükség esetén adja át azokat a készülék további felhasználóinak.
- Ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján szereplő feszültség megegyezik-e Ön elektromos aljzatának feszültségével. A tápcsatlakozó dugóját csak olyan aljzatba szabad csatlakoztatni, amely megfelel a vonatkozó szabványoknak. Az elektromos

adapter nem tartozék.

- Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják. Tartsa a készüléket és az elektromos vezetéket gyermekektől távol. A készüléket csak olyan személyek használhatják, akiknek fizikai vagy mentális képességei csökkentek, vagy nincs elegendő tapasztalatuk és tudásuk, ha felügyelet alatt állnak, vagy megfelelően tájékoztatták őket a biztonságos használatról és értik az esetleges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A gyermekek általi használat lehetőségéről konzultáljon kezelő fogorvosával. Alaposan oktassa ki és felügyelje a gyermekeket a készülék használatának során.
- Ha orvosa antibiotikum szedését javasolja tervezett fogászati beavatkozás előtt, konzultáljon vele a készülék és más fogászati eszközök használatáról is.
- Pacemakert viselő személyeknek a készülék használatát orvossal kell egyeztetniük.
- Ne permetezzen vizet közvetlenül a nyelv alá, a fül, az orr, a szem vagy más érzékeny területekre. • Ez a készülék nem játék. Gyermekek nem játszhatnak vele. Tartsa távol gyermekektől. Sérülésveszély az éles részek vagy a vezetékek általi fulladás miatt. Éles és működő részeket tartalmaz.
- Ezt a készüléket kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint használja.
- Ellenőrizze, hogy az Ön elektromos hálózatának feszültsége megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett feszültséggel.
- A szájuzhanyt mindig kemény és vízszintes felületre helyezze. Ne tegye közvetlenül fal mellé, és óvja a hőforrásoktól, például forró serpenyőktől, radiátoroktól, hűsgázóktól stb. Tartsa a töltőegységet és az elektromos kábelt megfelelő távolságban a forró felületektől.
- Ne használja a készüléket, ha az elektromos kábel, a csatlakozó sérült, vagy ha a készülék leesett a földre vagy bármilyen folyadékba.
- **Ne permetezzen vizet közvetlenül a nyelv alá, a fül, az orr vagy más érzékeny területekre. A készülék súlyos sérüléseket okozhat!**
- A készüléket csak a kézikönyvben leírtak vagy az orvos ajánlása szerint használja.
- Csak a gyártó által ajánlott fűvókákat használjon.
- A tartályt csak vízzel vagy más, fogorvosok és a gyártó által ajánlott oldattal (pl. szájvíz) tölts fel. A szájvíz és a víz aránya 1:1.
- Kerülje a szilárd részecskéket tartalmazó folyadékokat. Ezek elzárhatják a fűvókát vagy az egész rendszert.
- Ne használjon alkoholtartalmú szájvizet.
- A készülék kizárólag otthoni használatra készült.

A SZÁJZUHANY HASZNÁLATA:

Fontos!



Az első használat előtt töltsd a készüléket legalább 24 órán át!!! Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.

A) TÖLTSE FEL A TARTÁLYT:

A tartály feltöltése előtt mindig húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról!

Nyissa fel a víztartály fedelét, és töltsd fel langyos vízzel, illetve szükség szerint pótolja a vizet. A tartály maximális űrtartalma 230 ml.

Az első használatkor javasoljuk, hogy a bekapcsolt szájuzhanyt tartsa fejfelé, hogy a folyadék bejusson a készülék keringési rendszerébe. Ha ez nem történik meg, helyezze a fűvókát a szájába, és hozzon létre enyhe vákuumot, hogy a folyadék könnyebben bejusson a rendszerbe, lásd az ábrát.

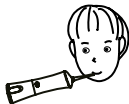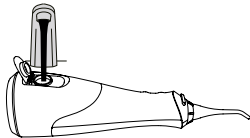

Távolítsa el a fűvóka rögzítési helyéről a védőfóliát.

A **(A)** fűvókát helyezze be a fűvóka helyére úgy, hogy szorosan illeszkedjen.

A fűvókát ismét eltávolíthatja a reteszelő gomb **(J)** megnyomásával és a fűvóka **(A)** óvatos meghúzásával.


C) A FOLYADÉKELOSZTÁSI MÓD BEÁLLÍTÁSA

Az irrigátor három elosztási módban képes működni:

- 1) **Gyengéd** pulzáló vízszugár
- 2) **Közepesen** erős pulzáló vízszugár
- 3) **Erős** pulzáló vízszugár

Használat közben tartsa az irrigátort a tartállyal inkább merőlegesen a földre, hogy biztosítva legyen a megfelelő szívás a tartályból.

Javasoljuk, hogy az irrigátort gyengéd vízsugárral kezdje használni, majd a módot saját érzése szerint változtassa. Mindig legyen óvatos. Ha ínyvérzés jelentkezik, hagyja abba a készülék használatát, és konzultáljon fogorvosával a további lépésekről.

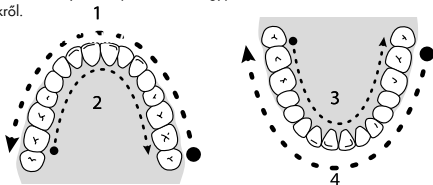

Hajoljon a mosdó fölé, helyezze a fúvókát a szájába, és irányítsa a fogakra. Kapcsolja be a készüléket. Vezesse a vízsugarat derékszögben az íny mentén. Csukja be a száját, hogy a víz ne fröccsenjen ki, hanem csak kifolyjon a mosdóba. Kezdje a tisztítást az őrlőfogaknál, majd fokozatosan haladjon a vízsugárral az első fogak felé. Mozgassa a fúvókát az íny mentén, és röviden álljon meg minden fogközben. Folytassa, amíg minden fog és fogköz tiszta nem lesz. Amint végzett, kapcsolja ki a készüléket, és ürítse ki a tartályt.

AKKUMULÁTOR KARBANTARTÁSA:

Ha az akkumulátor lemerül, öntse ki a felesleges vizet a tartályból. Vegye ki a töltőcsatlakozó dugóját (F).

Csatlakoztassa a kábel USB végét (H) az adapterhez (nem tartozék), a másik végét pedig a készülékhez.

Az akkumulátor töltéséhez a kiválasztott üzemmód (E) villogó jelzőfényre mutatja. Az akkumulátor teljesen feltöltött, ha mindhárom üzemmódjelző (E) folyamatosan világít.

Ha a szájuhanyt naponta egyszer vagy ritkábban használja, ajánlott az akkumulátort hetente egyszer éjszaka feltölteni hetente. Ha a készüléket naponta kétszer, többször vagy hosszabb ideig használja, gyakrabban töltsen fel. Ne hagyja teljesen lemerülni a készüléket, mert ez csökkenti az akkumulátor élettartamát, és legalább 24 órán át kell majd tölni a teljes feltöltéshez. Ha hosszabb időre szeretné eltenni az irrigátort, és nem fogja használni, mindig teljesen töltsen fel, ürítse ki a tartályt, és hagyja nyitva a tartály fedelét. Soha ne tárolja az irrigátort hosszabb ideig anélkül, hogy az akkumulátor teljesen fel lenne töltve.

Az akkumulátor töltése közben a készülék biztonsági okokból nem használható. Biztonsági okokból a készülék nem indítható el.

Ha oldatokat használ, minden használat után öblítse ki a tartályt. Töltsen meg részben meleg csapvízzel, és irányítsa a fúvókát a mosdóba. Kapcsolja be a készüléket, és hagyja, hogy a víz átfolyjon a fúvókán, amíg a tartály teljesen ki nem ürül. Így eltávolítja az oldat maradványait, és meghosszabbítja a készülék élettartamát.

- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne áztassa a készüléket.
- Szükség esetén tisztítsa meg a készüléket puha ruhával és enyhén, nem abrazív tisztítószerrel.
- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózatról.

Rendszeresen vízkötenítse a készüléket a gyártó kínálatában található megfelelő szerrel a www.dedraclub.hu oldalon.

Ez a szer eltávolítja a vízkövet a készülékből, és egyben fertőtleníti is.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA ÉS HULLADÉKKEZELÉS

- A teljes csomagolás környezetre ártalmatlan anyagokból készült, ezért hulladékgyűjtő központokban újrahasznosítás céljából elhelyezhető. A papírcsomagolás a kijelölt konténerekbe dobható. A többi csomagolóanyagot újrahasznosító központba kell leadni.
- Amennyiben nem kívánja tovább használni ezt a készüléket, környezetbarát módon és a hatályos jogszabályoknak megfelelően semmisítse meg.

SZERVIZ

Az irrigátor elektromos részének, beleértve a tápkábelt is, javítását csak hivatalos szerviz végezheti.

A Vaše DEDRA, s.r.o. vállalat szervize. **Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani.**

Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

HU: Tel.: +36 1 445 1772, www.dedraclub.hu

