

SYSTEMAT



IPL VELVET

HU - Használati útmutató

EL91262

**HU – Gratulálunk, hogy helyesen választotta termékünket
IPL VELVET EL91262 a SYSTEMAT sorozatból a DEDRA vállalatától.
Kívánjuk, hogy új segítőtársa sokáig és megbízhatóan szolgálja Önt.**

A SYSTEMAT sorozat a DEDRA vállalatától teljes körű segítőtársakat kínál otthonába és a testápoláshoz. Csak innovatív termékeket kínálunk, amelyeket mi magunk is használunk.

Mielőtt először üzembe helyezi, figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót, tekintse át az ábrákat, és őrizze meg az útmutatót. Mindig szigorúan tartsa be az útmutatót!

Üdvözljük a SYSTEMAT IPL VELVET szépségvilágában, amely IPL (Intense Pulsed Light) technológiát használ – intenzív, széles spektrumú fényimpulzust, amely hasonlít a lézersugárhoz, és az egyik leghatékonyabb módszert kínálja a nem kívánt szőrzet végleges eltávolítására.

Vigye át a kozmetikai szalonok professzionális technológiáját otthona biztonságába és nyugalmaiba.

A Systemat IPL VELVET kíméletes a bőréhez, és fájdalommentes, kényelmes és hatékony kezelést kínál, amely megszabadítja a nem kívánt szőrszálaktól. Bár a készülék nagyon érzékeny a bőréhez, óvatos használatot igényel.

TERMÉKLEÍRÁS



A CSOMAG TARTALMA

- | | |
|--|------------------------|
| 1) Készülék cserélhető pulzáló fejjel; | 3) Hálózati adapter |
| 2) Védőszemüveg; | 4) Használati útmutató |

BŐRTÍPUS FOTOTÍPUSA

A bőrből található melanin mennyiségétől függően 6 bőrtípust (ún. FOTOTÍPUST) különböztetünk meg. A bőrtípus a bőr természetes színétől és az UV-sugárzásnak való kitettségétől függ. A besorolást 1975-ben Dr. Thomas Fitzpatrick, a Harvard Medical School bőrgyógyásza vezette be.

Ez a besorolás a bőr reakciójának megfigyelésén alapul az első napsugárzásnak való kitettség után

(az adott évben először, délben, 30 percig).

A bőr reakciója a napsugárzásra Fitzpatrick besorolása szerint.

TYP PLETI	BARVA	CHARAKTERISTIKA	REAKCE PO PRVNÍM LETNÍM OPÁLENÍ
I	bílá, světlá pleť	má lehké poškození, žádný hnědý nádech	vždy se spálí, nikdy se neopálí
II	bílá, světlá pleť	často má lehké poškození, občas má hnědý nádech	většinou se spálí, téměř nikdy se neopálí
III	bílá, světlá pleť	někdy má lehké poškození, má hnědý nádech	někdy se středně spálí, běžné opálení
IV	středně hnědá pleť	zřídka má lehké škody, má hnědý nádech	spálí se málo, opaluje snadno
V	černohnědá pleť	neobvyklé lehké poškození, často hnědý nádech	zřídka se spálí, opaluje se velmi snadno
VI	tmavá pleť	žádné lehké poškození, má hnědý nádech	opaluje se velmi snadno

A beépített szemvédő eszköznek köszönhetően az IPL Velvet készülék csak akkor bocsát ki fényimpulzusokat, ha a fej alkalmazó ablaka teljesen érintkezik a bőrrel. Ennek ellenére ajánlott a mellékelt védőszemüveg használata.

KINEK NEM AJÁNLOTT AZ IPL VELVET KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA? ELLENJAVALLATOK

A készüléket soha ne használja, ha bőrtípusa **V** vagy **VI** (ritkán vagy soha nem ég le a napon, és bőre nagyon sötétre barnul).

Ilyen esetben nagy a bőrreakciók kockázata, például túlzott vagy elégtelen pigmentáció, jelentős bőrpír vagy akár égési sérülések.



- A készüléket soha ne használja, ha terhes vagy szoptat

Soha ne használja a készüléket, ha bármelyik alábbi betegségben szenved:

- Ha bőrbetegsége van, például aktív bőrrák, vagy ha bőrrákban szenved a kórtörténetében, vagy bármilyen más lokalizált daganatos góc található a kezelni kívánt területeken.
- Ha prekancerózus elváltozásai vagy több atipikus anyajegye van a kezelni kívánt területeken kezelni.
- Ha kollagénpézsdési zavara volt, beleértve a keloidos hegek kialakulását vagy a rossz sebgyógyulást.
- Ha vénás betegsége van a kórtörténetében, például visszér vagy kitágult hajszálerek a kezelni kívánt területeken.
- Ha fényérzékeny a bőre, amely könnyen kiütést vagy allergiás reakciót okoz.
- Ha gyulladása, ekcémája, égési sérülése, begyulladt szőrtüszői, nyílt sebe, horzsolása, herpeszvírusa (herpes simplex), sérülése vagy elváltozása és vérömlenye van a kezelni kívánt területeken.
- Ha az elmúlt időszakban sebészeti beavatkozáson esett át a kezelni kívánt területeken, az elmúlt négy hétben.
- Ha fényérzékeny epilepsziában szenved.
- Ha cukorbetegsége, lupus erythematosus, porfirin anyagcsere zavara vagy szívelégtelensége van.
- Ha bármilyen vérzékenységi rendellenessége van.

Soha ne használja a készüléket, ha az alábbi gyógyszerek bármelyikét szedi:

- Ha bőrét jelenleg vagy az elmúlt héten kozmetikai készítményekkel kezelték amelyek olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek károsíthatják a bőr szerkezetét
- Ha az elmúlt hat hónapban bármilyen kezelést alkalmazott, amely elvékonyítja a bőrt, így az hajlamosabb lehet a repedésekre, sérülésekre és irritációra.
- Ha fájdalomcsillapítókat szed, amelyek csökkentik a bőr hőérzékenységet.
- Ha fényérzékenységet okozó készítményeket vagy gyógyszereket szed, ellenőrizze a betegájékoztatót, és soha ne használja a készüléket, ha a tájékoztató szerint a gyógyszer fotoallergiás reakciókat okoz, fototoxikus reakciókat okoz, vagy ha a gyógyszer szedése alatt kerülni kell a napfényt.
- Ha véráldagsgátló gyógyszereket szed (beleértve a nagy dózisu aszpirint is) olyan módon, amely nem teszi lehetővé, hogy minden kezelés előtt legalább egyhetes szünetet tartson a gyógyszer szedésében.

Soha ne használja a készüléket az alábbi területeken:

- Arc
- A mellbimbókon, a mellbimbóudvaron, a kisajkakon, a hüvelyen, a végbélnyíláson és az orr, valamint a fül belsejében. Férfiak nem használhatják a herezacskón és az arcon.
- Mesterséges tárgyakon vagy azok közelében, például szilikon implantátumok, pacemakerek, bőr alatti portok (inzulinadagolók) vagy piercingek esetén.
- Anyajegyek, szeplők, kitágult hajszálerek, sötétebb pigmentált területek, hegek vagy bőrhibák esetén orvosi konzultáció nélkül.
- Szemölcsökön, tetoválásokon vagy tartós sminken. Ezeken a területeken történő használat égési sérülésekhez vezethet és tartós színváltozást okozhat.
- Azokon a területeken, ahol tartós hatású dezodort használ. Bőrreakciók léphetnek fel.
- Soha ne használja a készüléket napégette, frissen barnult vagy mesterségesen barnított bőrön.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A készüléket és az adaptert mindig tartsa szárazon. Ez a készülék nem mosható.
- A készüléket vagy annak részeit soha ne merítse vízbe, és ne mossa folyó víz alatt.
- Ha a készülék megsérült, ne érintse meg a belső részeket, hogy elkerülje az áramütést.
- Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékbe.
- Győződjön meg arról, hogy az elektromos aljzat feszültsége megegyezik a készülékével.
- Ellenőrizze, hogy a típustáblán feltüntetett érték megegyezik-e az elektromos aljzat feszültségével. Bármilyen hibás hálózati csatlakoztatás esetén a készülék visszafordíthatatlanul megsérülhet, amelyre nem vonatkozik a garancia.
- A tartozékok vagy hozzáférhető részek cseréje, szerelése és szétszerelése, valamint tisztítás előtt vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót az elektromos hálózathoz a konnektorból!
- Mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból, ha felügyelet nélkül hagyja, illetve szerelés előtt, szétszerelés vagy tisztítás előtt.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a készüléket kád, zuhany, mosdó vagy más vízzel teli edény közelében.

- Ha a készüléket fürdőszobában használja, használat után azonnal húzza ki a konnektorból, mert a víz közelsége veszélyt jelent még akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.
- A készüléket nem szabad vízbe meríteni, és nem szabad olyan helyen használni, ahol beleeshet a kádba vagy a mosdóba. Ha a készülék mégis vízbe esik, ne húzza ki! Először húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzathoz, és csak ezután vegye ki a készüléket. Ilyen esetekben vigye el a készüléket szakszervizbe, hogy ellenőrizzék a biztonságát és megfelelő működését. Ezt a készüléket ne használja víz közelében, például edényekben, mosdókban, kádakban, medencékben stb.
- Ha a tápkábel megsérült, biztonsági okokból cseréltesse ki a gyártóval, hivatalos garanciális vagy garancián túli szervizben.
- Ezt a készüléket 15 éves kortól gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalat és tudás nélküliek is használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy megfelelően tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról, és értik a kockázatokat, amelyek felmerülhetnek. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A 15 és 18 év közötti fiatalok a készüléket csak szülői vagy felügyeletet ellátó személy beleegyezésével vagy segítségével használhatják. A 18 éves vagy annál idősebb felnőttek korlátozás nélkül használhatják a készüléket.
- Az adapter transzformátort tartalmaz. Az adaptert soha ne cserélje le másik csatlakozóra. Ez veszélyes helyzethez vezethet.
- Ha az UV szűrő vagy a fénykibocsátó ablak sérült, a készüléket ne használja.
- Tisztítást és karbantartást gyermekek csak felügyelet mellett végezhetnek.


- Apró alkatrészeket tartalmaz. Fulladásveszély a kis alkatrészek lenyelése vagy belélegzése miatt.
- A csomagolás és a rögzítő elemek nem részei a készüléknek. Az első használat előtt távolítsa el őket.
- A csomagolást és a használati útmutatót őrizze meg későbbi felhasználásra. Tartsa távol gyermekektől. Ezt a készüléket 8 éves kortól gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalat és tudás nélküliek is használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy megfelelően tájékoztatták a készülék biztonságos használatáról, és értik a lehetséges kockázatokat. A gyermekek a készülékkel nem játszhatnak. Tisztítást és karbantartást gyermekek csak felügyelet mellett végezhetnek.
- A készülék kizárólag háztartási használatra készült. Nem alkalmas kereskedelmi használatra!
- A hálózati csatlakozót ne dugja be és ne húzza ki a konnektorból nedves kézzel, illetve ne húzza a tápkábelt.
- A szellőzőnyílásokat nem szabad letakarni. Ne helyezze a bekapcsolt készüléket puha felületekre (pl. ágy, törölköző, ágynemű, szőnyeg), mert eltarthatja a szellőzőnyílásokat. Használat után azonnal apcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózathoz, és hagyja kihűlni, mielőtt elteszi.
- A tápkábel nem sérülhet éles vagy forró tárgyaktól, nyílt lángtól és nem szabad vízbe meríteni.
- Ne tekerje a tápkábelt a készülék köré, így meghosszabbíthatja a kábel élettartamát.
- Csak sértetlen és megfelelő hosszabbító hálózati kábeleket használjon.
- A készüléket soha ne használja más célra, mint amire szánták és ahogyan ebben a útmutatóban le van írva!
- A gyártó nem vállal felelősséget a készülék és tartozékainak helytelen használatából eredő károkért (pl. áramütés, tűz, égési sérülés, hajkárosodás), és nem vállal garanciát a készülékre, ha a fenti biztonsági figyelmeztetéseket nem tartják be.
- A készüléket ne hagyja felügyelet nélkül működni. Ne használja a készüléket, és forduljon hivatalos szervizközpont, ha:
 - a készülék leesett a földre
 - a készülék nem működik megfelelően
- A készüléket le kell választani:
 - tisztítás és karbantartás előtt,
 - ha nem működik megfelelően,
 - amint abbahagyta a használatát
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült
- Ne merítse a készüléket vízbe (még tisztításkor sem)
- Ne tartsa a készüléket nedves kézzel.
- A készüléket csak a fogantyúnál fogja meg
- A hálózatról való lecsatlakoztatáskor ne a vezeték, hanem a dugót húzza
- Ne használjon elektromos hosszabbítót.
- Tisztításhoz ne használjon súrolószereket vagy olyan szereket, amelyek korróziót okozhatnak.
- Ne használja a készüléket 0 °C alatti vagy 35 °C feletti hőmérsékleten.

FIGYELEM

- Higiéniai okokból a készüléket csak egy személy használja.
- A készüléket csak olyan beállításokkal használja, amelyek megfelelnek az Ön bőrtípusának. Használatkor a javasoltnál magasabb beállítás esetén nőhet a bőrreakciók és mellékhatások kockázata.
- A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően használja, ahogy a használati útmutatóban látható.
- A készülék tisztításához soha ne használjon sűrített levegőt, fém szivacsot, dörzsölő vagy agresszív tisztítószeret – például benzint vagy acetont.
- A készülék ellenőrzését vagy javítását mindig bízza a DEDRA szervizére. A szakképzetlen személyek által végzett javítások veszélyes helyzeteket okozhatnak a felhasználó számára.

HOGYAN MŰKÖDIK AZ IPL TECHNOLOGIA?

Az IPL (Intense Pulsed Light) technológia meghatározott hullámhosszúságú fényimpulzusokat juttat a bőrre, amelyeket a szőrszálak gyökerei elnyelnek. Minél sötétebb a szőr, annál jobban elnyeli a fényimpulzusokat és így könnyebben eltávolíthatók. Ezek a fényimpulzusok stimulálják a szőrtüszőt/gyökeret, hogy nyugalmi fázisba lépjen. Ennek eredményeként a szőrszálak természetesen ki-hullanak, és nem nőnek vissza, így a bőr tartósan selymes marad.

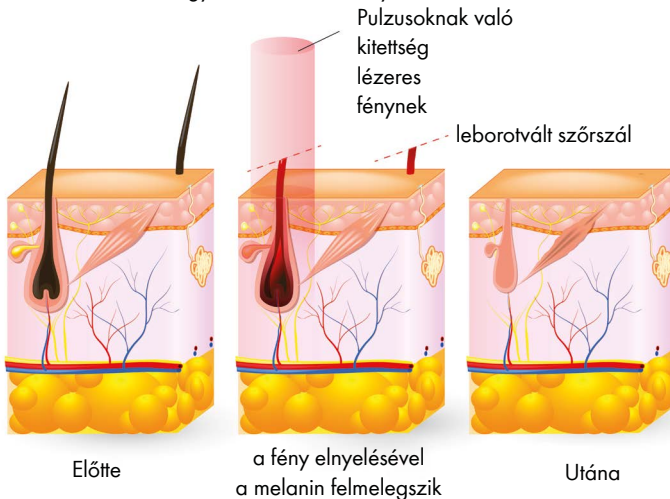

A szőrszálak a testen egyszerre különböző növekedési fázisokban vannak. Az IPL technológia csak a növekedési fázisban hatékony. Ebben a fázisban soha nem található az összes szőrszál egyszerre egy időben. Ezért javasoljuk a nyolchetes kezelési tervet, amelyet fenntartó kezelések követnek, hogy biztosítsák az Ön által kívánt eredményt. a kívánt eredményt.

Megjegyzés: Az IPL Velvet készülék alkalmazása kevésbé hatékony, ha a szőrszálak színe világos szőke vagy szőke. A világos szőrszálak alacsonyabb fényvezető képességgel rendelkeznek, ezért nem képesek a gyökeret nyugalmi fázisba juttatni. A világos, szőke és ősz szőrszálak esetén a technológia IPL Velvet nem megfelelő és nem hatékony.

Az IPL Velvet készülék hatékonysága eltérő lehet:

- különböző személyek között,
- a kezelt területtől függően,
- a szőrszálak színétől függően.

Figyelem: Az IPL Velvet készülék nem hatékony fehér, ősz vagy világos szőke szőrszálakon. A fehér, ősz vagy világos szőke szőrszálak kevés melanint tartalmaznak, és a pulzáló fénykezelésre az IPL Velvet készülékkel nem reagálnak megfelelően.

Normális, hogy az IPL VELVET készülékkel végzett epilálás után 1-2 hétig a szőrszálak úgy tűnnek, mintha tovább nőnének, mintha tovább nőnének. Körülbelül két hét elteltével észre fogja venni, hogy ezek a szőrszálak kihullanak vagy leválnak a szőrtüszőtől. Ezeket a szálakat ne húzza ki az eltávolításuk érdekében. Hagyja, hogy a szőrszálak természetesen kihulljanak. Előfordulhat, hogy az IPL VELVET készülékkel végzett epilálás után néhány szőrszál világosabb és vékonyabb lesz. Ez a jelenség normális. Ismétlje meg az alkalmazást.

A KÉSZÜLÉKKEL VÉGZETT SZÜKSÉGES KEZELÉS BECSÜLT IDEJE

Nohy po kolena	8-10 minut
Nohy	15 minut
Záda	5 minut
Hrudník	5 minut
Spodní podbřišek	2 minuty
Podpaží	1 minuta

AZ IPL VELVET KÉSZÜLÉKKEL VÉGZETT EPILÁCIÓS KEZELÉSEK TERVEZÉSE

Javasoljuk, hogy az IPL Velvet készülékkel végzett kezeléseket előre tervezze meg:

Ajánlott betartani az alábbi időbeosztást, amely segít tökéletes eredményeket elérni.

- Az első 4 IPL VELVET készülékkel végzett epilációs kezelést 2 hetes időközönként kell elvégezni.
- A további IPL VELVET készülékkel végzett epilációs kezeléseket mindig 4 hetente kell elvégezni (amíg el nem éri a kívánt eredményt).
- Ezután, ha új szőrnövekedés jelentkezik, az IPL VELVET készüléket alkalmanként használja, amíg el nem éri a tartós eredményt; a kezelések között legalább 4 hétnek kell eltelnie!

FIGYELEM:

- Ugyanazon terület kezelése 2 hétnél gyakrabban nem eredményez jobb eredményt, és okozhat nem kívánt mellékhatásokat.
- Ajánlott az IPL VELVET készüléket ésszerűen használni, azaz ne ismétlje túl gyakran az IPL VELVET készülékkel végzett kezeléseket végtelenségig. Nagyon kielégítő eredmény eléréséhez elegendő egy átfogó kezelés (összesen 7-8 epilációs kezelés) évente egyszer).

Megjegyzés: A szőrszálak hormonális tényezők és fiziológiai változások miatt ismét aktívvá válhatnak. Ilyen esetben fenntartó epilációs kezeléseket lehet végezni IPL VELVET készülékkel (a kezelések között legalább 4 hétnek kell eltelnie).

TANÁCSOK NAPOZÁSHOZ

Napozás TERMÉSZETES vagy MESTERSÉGES fénnyel

Minden IPL Velvet készülékkel végzett kezelés után várjon legalább 48 órát. Ezután is győződjön meg róla, hogy a bőrön nem jelentkezik kezelés okozta bőrpír.

- Ha a kezelést követő 48 órán belül a bőrt kiteszi napfénynek (akkor is, ha nem szándékozik napozni), használjon napvédő készítményt a kezelt területeken legalább 50-es fényvédő faktorral. Ezen időszak után használhat legalább 30-as fényvédő faktorú naptejet.
- Napozás után várjon az IPL VELVET készülék használatá előtt legalább 2 hetet. Végezzen bőrpróbát, és határozza meg a megfelelő fényintenzitás-beállítást.
- Ne használja az IPL VELVET készüléket napégette bőrfelületen.

Megjegyzés: Az alkalmi és közvetett napsgárzásnak való kitettség nem számít napozásnak.

Napozás KRÉMEKKEL


Ha mesterséges önbarnító testápolót használt, várja meg, amíg a mesterséges barnaság teljesen eltűnik. Csak ezután használja az IPL VELVET készüléket



AZ IPL VELVET KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT

Bőr előkészítése:

Az IPL VELVET készülékkel végzett kezelés előtt távolítsa el a felszíni szőrszálakat mechanikusan a bőrfelületről. Ez lehetővé teszi, hogy a kibocsátott fény könnyebben eljusson a szőrszál gyökeréig (a szőrszál megmaradt része a bőrben fényvezetőként működik). Használhat hagyományos borotválást, trimmelést, epilálást vagy gyantázást epilálást. Ne használjon szőrtelenítő krémeket. A szőrtelenítő krémekben található anyagok bőrreakciókat okozhatnak. IPL VELVET használata esetén viasz használata esetén javasoljuk, hogy a készülék használata előtt várjon 24 órát

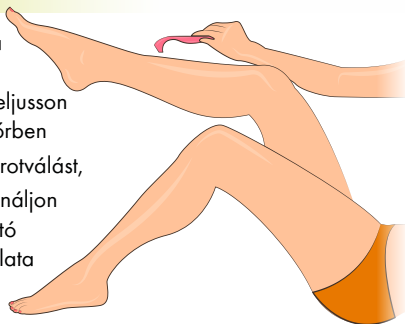

az IPL VELVET használata előtt. Kezelés előtt javasoljuk a zuhanyzást, így biztosítja az esetleges viaszmaradványok eltávolítását a bőrről.

- Azokat a területeket, amelyeket IPL VELVET készülékkel szeretne kezelni, előzetesen készítse elő.
- Tisztítsa meg a bőrt, ügyeljen arra, hogy teljesen szőrtelen, száraz és zsírtalan legyen.

A bőrtesztet végezze el az eszköz első használata előtt, vagy minden alkalommal, ha napozott. Végezze el a tesztet minden testrészén, ahol IPL VELVET készülékkel szeretne kezelést végezni. A bőrteszt fontos annak megállapításához, hogyan reagál a bőre a fényintenzitás beállítására minden testrészén.

- 1) Válasszon ki egy olyan testrészt, amely közel van ahhoz, amelyet kezelni szeretne
- 2) Nyomja meg az **ON/OFF** gombot (1. ábra), kapcsolja be a készüléket. Hagyja az eszközt az alapértelmezett, legalacsonyabb intenzitás beállításán.
- 3) Helyezze a készüléket a bőrre, és a villanás gomb (2. ábra) megnyomásával küldjön villanást.
- 4) Mozgassa a készüléket a bőrön egy másik területre, amelyet kezelni szeretne.
- 5) Növelje a beállítást egy szinttel ("+" gomb), küldjön villanást, majd helyezze át a készüléket egy másik területre. Ismételje meg a folyamatot a többi intenzitási szintnél is ("+" gomb használata).
- 6) A bőrteszt után várjon 24 órát, és ellenőrizze, hogy jelentkezett-e bármilyen reakció a bőrén. reakció. Ha reakció jelentkezett, a következő használatához válassza azt a legmagasabb beállítást, amely nem okozott semmilyen bőrreakciót.

Megjegyzés: A bőre különböző napokon vagy helyzetekben eltérően reagálhat, különféle okokból.

A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

- 1) Használat előtt tisztítsa meg a pulzáló fejet a szennyeződésektől.
- 2) Dugja be a csatlakozót a készülékbe, az adaptert pedig a fali aljzatba.
- 3) Kapcsolja be a készüléket, és válassza ki a bőrtónusának megfelelő fényintenzitást.
- 4) Nyomja a készüléket merőlegesen a bőréhez úgy, hogy a toldalék érintkezzen a bőrével. Az integrált biztonsági rendszer megakadályozza a véletlen villanásokat bőrkontaktus nélkül.
- 5) Nyomja a készüléket szorosan a bőréhez, hogy biztosítsa a megfelelő érintkezést a bőrrel. **A bőrérzékelő** (4. ábra) villogni kezd. A készülék készen áll a villanásra. Nyomja meg a **villanás gombot** (2. ábra). A villanás után a készüléknek fel kell készülnie a következő villanásra. Az ehhez szükséges idő a villanás ideje a kiválasztott intenzitástól függ, és a villogó jelzőfények (5. ábra) mutatják – **Töltöttségjelző a készülék töltöttsége**. Amint a jelzőfények (5. ábra) abbahagyják a villogást, ismét villanást küldhet a gomb (2. ábra) megnyomásával
- 6) A villanás gomb megnyomásával villanást küld. A villanásnak meleg érzést kell keltenie. Használat közben javasoljuk a védőszemüveg viselését. A készüléket jól megvilágított helyiségben használja. A villanás így kevésbé lesz intenzív a szemének.
- 7) Helyezze a készüléket egy másik területre, amelyet kezelni szeretne. Minden villanás után akár 3,5 másodpercig is eltarthat, amíg a készülék készen áll a következő villanásra. Akkor küldhet villanást, ha a jelzőfény „**A készülék töltöttségjelzője**” (5. ábra) abbahagyja a villogást és folyamatosan világít.
- 8) A kezelés befejezése után nyomja meg ismét az **ON/OFF** gombot (1. ábra)

ÁLTALÁNOS BŐRREAKCIÓK AZ IPL VELVET KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA UTÁN

Használat után a bőr enyhén kipirosodhat, bizsereghet, csíphet vagy melegegdedhet. Ezek a reakciók teljesen normálisak, ártalmatlanok és gyorsan elmúlnak. Borotválás és fénykezelés együttes alkalmazásakor a bőr száraznak és viszketőnek tűnhet. Az érintett területet hűtheti jéggel vagy nedves borogatással. Ha a bőr szárazsága továbbra is fennáll, 24 óra elteltével a kezelt területre illatmentes hidratáló krémet kenhet.

Használat után biztonságosan alkalmazhat arctejet, krémet vagy dezodort a kezelt területeken, hidratáló vagy más kozmetikai készítmény.

Ha a kezelés után bőrirritációt vagy bőrpírt tapasztal, várjon, amíg ezek a tünetek elmúlnak, mielőtt bármilyen készítményt alkalmazna a bőrön.

Ha a készítmény felvitele után bőrirritációt vagy bőrpírt tapasztal, öblítse le vízzel.

VÉDJÜK EGYÜTT A KÖRNYEZETET!

Készüléke számos újrahasznosítható vagy újrafelhasználható anyagot tartalmaz. Adja le egy gyűjtőhelyen, vagy ha ilyen nincs, egy szerződött szervizközpontban, ahol megfelelően kezelik. Ezek az utasítások megtalálhatók a www.dedraclub.hu oldalunkon is.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség: 100–240 V

Névleges frekvencia: 50–60 Hz

Névleges teljesítményfelvétel: 30 W

Működési feltételek Hőmérséklet: +10 °C-tól 40 °C-ig

Relatív páratartalom: 30%–75%

Az alkalmazási ablak méretei: 1,3 x 3,3 cm (3,9 cm²)

A toldalék spektruma: 495–1200 nm

Maximális kisülésszám: akár 150 000 impulzus



Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

HU: Tel.: +36 1 445 1772, www.dedraclub.hu

