

SYSTEMAT



BLACK HEADS FACIAL VACUMIZER EL25931

HU – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

HU: Tel.: +36 1 445 1772, www.dedraclub.hu

Köszönjük, hogy megvásárolta otthoni vákuumos arctisztító készülékünket.

FACIAL VACUUMIZER EL25931

A készülék az elegáns dizájn, a funkcionalitás és a halk működés tökéletes kombinációját kínálja. Kíméletesen eltávolítja az eltömődött pórusokat, mitesszereket, és elősegíti a kozmetikai arckezelő készítmények jobb felszívódását.

A csomagban 3 különböző fejet talál, így a nehezen elérhető területek tisztítása sem okoz gondot.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS:

Ahogy más elektromos készülékek használatakor is, a FACIAL VACUUMIZER esetében is fokozott figyelmet kell fordítani a biztonságos használatra, különösen ha gyermekek tartózkodnak a közelben. Ezeket a biztonsági előírásokat minden esetben be kell tartani. Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el a teljes használati útmutatót. Őrizze meg ezt az útmutatót!

- SOHA ne használja a készüléket elektromos hálózatra csatlakoztatva, ha a keze nedves vagy vizes.
- SOHA ne helyezze és ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahonnan a kádba vagy a vízzel teli mosdóba eshet.
- SOHA ne merítse a készülék testét (az akkumulátort) vízbe vagy más folyadékba.
- SOHA ne használja a készüléket fürdés vagy zuhanyzás közben.
- SOHA ne töltsen a készüléket olyan töltővel, amely bármilyen folyadékba esett. Azonnal húzza ki a töltőt a konnektorból!

A villamos áramütés, tűz, egészségkárosodás vagy anyagi kár kockázatának csökkentése érdekében kövesse az alábbi utasításokat:


- Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és tekintse át az ábrákat. Az útmutató a készülék szerves részét képezi – szükség esetén adja tovább más felhasználónak.
- Ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik-e az elektromos hálózat feszültségével. A csatlakozót csak szabványos elektromos aljzatba szabad bedugni. A hálózati adapter nem tartozéka a csomagnak.
- A készülék gyermekek által nem használható. Tartsa a készüléket és a hálózati vezetéket gyermekektől távol. A készüléket kizárólag olyan személyek használhatják, akik fizikailag vagy mentálisan korlátozottak, illetve nincs elegendő tapasztalatuk, csak felügyelet mellett, vagy ha előzetesen betanították őket a biztonságos használatra és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel. A készülék nem játék, gyermekek nem játszhatnak vele.
- A gyermekek használatával kapcsolatban konzultáljon kezelőorvosával. Ha mégis gyermek használja, biztosítson számára alapos oktatást és folyamatos felügyeletet.
- Soha ne irányítson vízsugarat a nyelv alá, fülbe, orra, szembe vagy egyéb érzékeny testrészekre.
- A készülék nem játékszer. Tartsa gyermekektől távol. Sérülést okozhat az éles alkatrészekkel vagy megfulladást a kábel által.
- A készüléket kizárólag a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja.
- Győződjön meg róla, hogy az elektromos hálózat feszültsége megegyezik a készüléken feltüntetett adattal.
- A vákuumkészüléket mindig szilárd és vízszintes felületre helyezze. Ne tegye közvetlenül falhoz, és óvja hőforrásoktól – pl. forró serpenyők, radiátorok, hősugárzók stb. A töltőt és a hálózati kábelt tartsa távol forró felületektől.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, illetve ha a készülék leesett vagy folyadékba esett.
- A készüléket kizárólag a kézikönyvben leírt módon használja.
- Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használja.
- A készülék kizárólag otthoni használatra készült.
- Ne használja a készüléket más célra, mint amire tervezték – az elhalt hámréteg kéméletes eltávolítására és a bőr természetes megújulásának támogatására szolgáló masszázshoz.
- A készüléket ne használja napi egy alkalomnál gyakrabban.
- Ne használja a készüléket abrazív krémekkel vagy mechanikai/kémiai peelingekkel együtt, mert ez bőrkárosodáshoz vagy a készülék meghibásodáshoz vezethet.
- A FACIAL VACUUMIZER segíti a krémek, szérumok és arcmaszok felszívódását. Javasoljuk, hogy az első 2–4 hét során ne váltson kozmetikai terméket. Ha ezt követően új krémet szeretne kipróbálni, először kis bőrfelületen tesztelje. Ha az eszközzel kezelt bőrfelületen irritáció lép fel, a krémet ne használja.

NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET AZ ALÁBBI ESETEKBE:

- Ha az érintett bőrfelületen bármilyen bőrbetegségben szenved: nyílt seb, kiütés, égés, napégés, pikkelysömör, ekcéma, gyulladás, rosacea (borsóka), teleangiectázia (kuperózis vagy hajszálértágulat), érzékeny bőr, aktív fertőzések – pl. övsömör vagy akne esetén.
- Ha az érintett területen nagy anyajegy, tűzfolt (nevus flammeus), tartós smink, tetoválás, szilikon töltőanyag vagy irritált bőrfelület található.
- Ha bőre az elmúlt két hét során átesett kozmetikai kezeléssel (pl. kémiai vagy mechanikai hámlasztás, lézeres vagy frakcionált lézeres kezelés, mezoterápia, töltőanyagokkal végzett beavatkozás).

- Ha olyan gyógyszereket szed, amelyek hatással vannak a bőrre – például szteroidokat vagy akné elleni szereket (mint pl. Accutane, Isotretinoin vagy Roaccutane). Ilyen esetekben konzultáljon kezelőorvosával vagy bőrgyógyászával.
- Ha szemölcsre van, semmilyen körülmények között ne próbálja meg eltávolítani ezzel a készülékkel – a fertőzés továbbterjedhet.
- Ha az érintett területen heg található – használat előtt konzultáljon orvosával vagy bőrgyógyászával.
- Ha az eszközt más otthoni bőrápolási rendszerrel együtt használná, amely aktív hámlasztó összetevőt tartalmaz.
- Ha bőrbetegsége van, például aktív bőrrák, ha bőrrák szerepel a kórelőzményében, vagy ha bármilyen más lokalizált daganatos elváltozás található az érintett területeken.
- Ha az érintett bőrterületen rákmegelőző elváltozások (prekancerózus léziók) vagy több, szokatlan megjelenésű anyajegy található.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA:

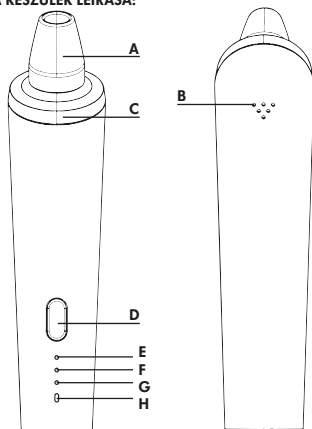

Nagy szívófej – alkalmas nagyobb felületekhez, például a homlokra vagy az orr oldalára.



Kis szívófej – érzékeny arcterületekhez, finom bőrfelületre alkalmas.



Lapos szívófej – a bőrhöz való rövid érintkezéshez és azonnali leválasztáshoz készült.

- A – Levehető szívófej
- B – Szellőzőnyílások
- C – Díszítő ezüstgyűrű
- D – ON/OFF gomb, amely a módváltást is lehetővé teszi
- E – 1-es fényjelzés – alacsony szívóerő
- F – 2-es fényjelzés – közepes szívóerő
- G – 3-as fényjelzés – magas szívóerő
- H – Alacsony akkumulátorszint jelzőfény

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATRA VALÓ ELŐKÉSZÍTÉSE:

Használat előtt alaposan tisztítsa meg az arc bőrét. Ha arc tisztító habot vagy más tisztítószer alkalmazott, javasoljuk ezek maradéktalan eltávolítását az arc lemosásával a készülék használata előtt. A bőrt törölje szárazra.

Ne használja a készüléket arckrémekkel, maszkokkal vagy más arcápoló kozmetikumokkal egyidejűleg.

- Ne használja a készüléket zuhanyzás vagy fürdés közben!
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a szívófej nem sérült-e (pl. leesés következtében).
- Ne használjon sérült szívófejet, mert az sérülést okozhat!
- Ne használja a készüléket olyan területeken, ahol anyajegy, tartós smink, tetoválás stb. található – lásd a jelen útmutató korábbi részét.
- Használat előtt távolítsa el minden ékszert és vegye ki a kontaktlencsét.
- A készüléket naponta legfeljebb egyszer, maximum 2 percig használja. A hosszabb használat irritációt, véraláfutást vagy egyéb sérülést okozhat. Az egyéni használati idő a bőr állapotától és az Ön gyakorlottságától függ.

ELSŐ HASZNÁLAT:

A készülék arcon történő első használata előtt javasoljuk, hogy tesztelje a bőr reakcióját az alkar belső oldalán.

1) Helyezze fel a szívófejet a készülék testére.

2) Nyomja meg az ON/OFF gombot a készülék bekapcsolásához.

3) Egyszer húzza végig a készüléket az alkar belső oldalán, majd várjon körülbelül egy órát.

4) Ha bármilyen bőrreakció (pl. bőrpír) egy órán belül elmúlik, a készüléket biztonságosan használhatja az arcon.

ELSŐ HASZNÁLAT AZ ARCON:

A készüléket naponta csak egyszer használja!

A túl gyakori használat bőrirritációt okozhat, ezért ne használja a készüléket az ajánlottnál gyakrabban!



1. lépés:

Először alaposan tisztítsa meg az arcot. A tisztítás után gőzölje az arcot arccal használható gőzölő készülékkel, vagy meleg, nedves törölközővel puhítsa fel a bőrt.

2. lépés:

Válassza ki a megfelelő szívófejet, majd helyezze fel a készülékre.

3. lépés:

Kapcsolja be a vákuumkészüléket, és állítsa be a kívánt szívóerősséget.

4. lépés:

Helyezze a szívófejet finoman a bőrre, és lassan, folyamatosan mozgassa azt a bőrfelületen. Ne nyomja rá az eszközt, és tartsa a fej folyamatos mozgásban – ne álljon meg egy helyen, mert bőrirritációt vagy véraláfutást okozhat. Ne használja a készüléket a szemkörnyéki területen, mert ott a bőr rendkívül érzékeny és vékony.

5. lépés:

A teljes használati idő ne haladja meg a 2 percet. A készüléket az ON/OFF gomb ismételt megnyomásával kapcsolja ki, amíg teljesen le nem áll.

6. lépés:

A kezelés befejezése után öblítse le arcát hideg vízzel. Ezután vigyen fel ápoló arckrémeket vagy arcmaszkot. Kerülje a közvetlen napfényt a bőrfelületen.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

Használat után minden alkalommal távolítsa el a szívófejet, és alaposan öblítse le langyos víz alatt.

Ha merítse a készüléket vízbe, és ne nedvesítse be. A tisztításhoz ne használjon dörzsoszivacsot, súrolószereket vagy agresszív folyékony tisztítószerkeket.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA:

- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne nedvesítse be!
- Szükség esetén tisztítsa meg a készüléket puha kendővel és enyhé, nem abrazív tisztítószerrel.
- A tisztítás megkezdése előtt mindig húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról.

AKKUMULÁTOR KARBANTARTÁSA:

Ha naponta egyszer vagy ritkábban használja a készüléket, javasolt hetente egyszer éjszaka feltölteni az akkumulátort. Ne hagyja az akkumulátort teljesen lemerülni, mert ezzel csökkenhet az élettartama. Teljes lemerülés után a teljes feltöltés akár 24 órát is igénybe vehet. Ha hosszabb időre kívánja a készüléket eltenni, minden esetben teljesen feltöltött állapotban tárolja. Soha ne tárolja a készüléket hosszabb időre lemerült akkumulátorral.

A KÉSZÜLÉK MEGSEMMISÍTÉSE ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

- A csomagolás kizárólag környezetbarát anyagokból készült, amelyek szelektív hulladékgyűjtő központban újrahasznosíthatók. A kartondobozt helyezze a papírhulladék számára kijelölt gyűjtőbe. A többi csomagolóanyag újrahasznosítás céljából adja le a megfelelő újrahasznosító központban.
- Ha a készüléket már nem kívánja használni, kérjük, környezetkímélő módon és a hatályos jogszabályoknak megfelelően semmisítse meg.

SZERVIZ:

A vákuumkészülék elektromos részeinek – beleértve a hálózati kábelt is – javítását kizárólag a Vaše DEDRA, s.r.o. hivatalos szervize végezheti. **Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket!**